

beoka

Перкусійний масажер

BEOKA QL/MINI.C1-A latte

Інструкція з експлуатації

Дякуємо, що обрали перкусійний масажер Beoka.

Цей пристрій забезпечує глибоке розслаблення фасцій

та м'язів завдяки потужному перкусійному масажу.

Будь ласка, використовуйте пристрій обережно та

безпечно, насолоджуючись розслабленням м'язів і тіла.

Щоб гарантувати безпеку та уникнути матеріальних

збитків, уважно прочитайте дане керівництво

користувача і використовуйте пристрій у відповідності

до інструкцій. Недотримання вимог керівництва

користувача може призвести до серйозних травм або

значних матеріальних пошкоджень.

Як виробник інтелектуального медичного

компанія Beoka понад два десятиліття зосереджується

на сфері спортивної реабілітації та прагне створити

світовий професійний бренд спортивної реабілітації.

Попередження та застереження з безпечної експлуатації

- Цей продукт не є медичним пристроєм і не призначений для медичного використання.
- Пристрій призначений виключно для здорових дорослих. Людям похилого віку, дітям, а також особам із обмеженими когнітивними здібностями або порушеннями чутливості не рекомендується користуватися цим продуктом, або слід робити це лише під наглядом.
- Не використовуйте та не зберігайте цей продукт у межах досяжності немовлят і дітей, оскільки це може призвести до нещасних випадків, травм чи фізичного дискомфорту.
- Користуйтеся пристроєм обережно. Надмірна сила або занадто висока швидкість під час масажу можуть спричинити синці. Регулярно оглядайте масажовану ділянку та негайно припиніть використання пристрою при появі болю чи дискомфорту. Якщо біль або дискомфорт не минають, зверніться до лікаря.
- Використовуйте пристрій лише на м'яких тканинах, уникайте зон із кістковими виступами та твердими структурами, включно з головою, шийним відділом хребта, тілами хребців, суглобами, гомілками, тильним боком стоп і кистей тощо.
- Не використовуйте пристрій у ділянках, де розташовані чутливі органи та елементи центральної нервової системи, таких як черевна порожнина, хребет тощо.

- Категорично заборонено використовувати масажний пістолет у ділянці геніталій (зокрема в сексуальних цілях). Це потужний масажний пристрій, який може спричинити серйозні фізичні травми.
- Не застосовуйте пристрій на ділянках, де можливі переломи або інші пошкодження кісток.
- Тримайте пальці, волосся та інші частини тіла подалі від привідного стрижня (вала) та зворотного боку масажної насадки, щоб уникнути ризику ущемлення та травм.
- Використовуйте пристрій лише на чистій і сухій шкірі. Легко притискайте насадку до шкіри та плавно переміщуйте по тілу; масажуйте кожну точку приблизно 60 секунд.
- Не використовуйте пристрій на або поблизу ділянок із імплантатами (наприклад, грудні імплантати або протези), оскільки це може послабити імплантат або вплинути на його роботу.
- Пристрій не підходить людям, яким лікар заборонив масаж, оскільки його використання може спричинити нещасні випадки, травми чи фізичний дискомфорт. До таких користувачів належать пацієнти з варикозним розширенням вен, тромботичними захворюваннями, будь-якими видами дерматиту, шкірними інфекціями, місцевими кровотечами, застоєм крові, саднами, забоями та висипаннями.
- Цей продукт призначений виключно для здорових дорослих та не рекомендований людям із такими (але не лише) станами: вагітність, діабет з ускладненнями (нейропатія, ушкодження сітківки),

Заходи безпеки під час використання акумулятора

- Ніколи не розбирайте акумулятор.
- Тримайте акумулятор подалі від вогню та негайно припиніть його використання у разі протікання або появи незвичного запаху. Уникайте контакту витеклої рідини зі шкірою, очима чи іншими частинами тіла. У разі потрапляння ретельно промийте ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- Не використовуйте акумулятор, якщо помічаєте будь-які аномалії, такі як запах, надмірне нагрівання, деформація, зміна кольору чи інші незвичні ознаки. Якщо акумулятор у цей момент використовується у конкретній установці. Якщо цей пристрій спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому (що можна визначити шляхом вимкання та вимикання пристрою), користувачу рекомендується усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:
- Не бийте по акумулятору та не наступайте на нього.
- Ресурс акумулятора може змінюватися залежно від умов використання та експлуатації. Якщо пристрій тривалий час не використовується, тримайте його вимкненим і заряджайте принаймні один раз на місяць, щоб продовжити строк служби акумулятора.

- Змінити орієнтацію або розташування приймальної антени.
- Збільшити відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключити пристрій до розетки, яка належить до іншого електричного кола, ніж те, до якого підключено приймач.
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого фахівця з радіо/ТВ-техніки.

Заява про відповідність вимогам FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація пристрою допускається за умови дотримання таких двох умов:

- Пристрій не повинен спричиняти шкідливих перешкод.
- Пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, у тому числі такі, що можуть призвести до небажаної роботи пристрою.

Примітки до заяви FCC

Цей пристрій було протестовано і визнано таким, що відповідає вимогам до цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових установках. Однак не існує гарантії, що перешкоди не виникатимуть у конкретній установці. Якщо цей пристрій спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому (що можна визначити шляхом вимкання та вимикання пристрою), користувачу рекомендується усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

Директива WEEE

Належне поводження з приладом:

Цей символ означає, що виріб не можна утилізувати як побутові відходи разом із несортованим сміттям. Щоб запобігти можливій шкоді для довкілля та здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, здавайте цей продукт у відповідні пункти збору для подальшої переробки та повторного використання матеріалів. Для повернення використаного пристрою скористайтеся системою збору й повернення або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть передати цей виріб до спеціалізованого центру безпечної переробки.

Декларація відповідності RoHS

Наші вироби відповідають вимогам Директиви щодо обмеження використання небезпечних речовин 2011/65/EU (RoHS 2.0). Сировина та компоненти продукції відповідають обмеженням щодо вмісту таких токсичних та небезпечних речовин:

Кадмій (Cd): <100 ppm
Ртуть (Hg): <1000 ppm
Полібромовані біфеніли (PBB): <1000 ppm
Біс(2-етилгексил)фталат (DEHP): <1000 ppm
Бензилбутилфталат (BBP): <1000 ppm
Дибутилфталат (DBP): <1000 ppm
Свинець (Pb): <1000 ppm
Шестивалентний хром (Cr VI): <1000 ppm
Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE): <1000 ppm
Дизобутилфталат (DIBP): <1000 ppm.

Технічні характеристики:

- Назва продукту:Перкусійний масажер
- Модель продукту: QL/MINI.C1-A
- Структура: основні елементи включають блок керування, масажні насадки та літєвий акумулятор
- Частота вертикальної вібрації масажного пістолета: 30–50 Гц (1800–3000 об/хв)
- Амплітуда: 7 мм
- Номінальна потужність: 25 Вт
- Номінальна напруга пристрою: 11,1 В
- Ємність акумулятора: 800 мА·год
- Таймер: інтелектуальне авто-вимкнення через 10 хвилин роботи
- Пристрій оснащено вимикачем для керування режимами роботи
- Масажну насадку можна замінювати в залежності від потреби
- Режим роботи: переривчастий (інтервальний) режим.

Основні елементи пристрою

Змінна масажна насадка

Зарядний роз'єм Type-C

Індикатор живлення

Корпус

Кнопка живлення / перемикач рівнів

Індикатор рівня інтенсивності

Інструкція з використання

1.Перед першим використанням масажного пістолета необхідно встановити масажну насадку. Щоб встановити масажну насадку, дістаньте її з упаковки, вставте у роз'єм на масажному пістолеті та переконайтеся, що вона надійно зафіксована.

3. Світлодіодний індикатор показує частоту ударних рухів: Рівень 1 відповідає найнижчій частоті, Рівень 5 – найвищій.

Застосовуйте необхідний тиск при обраному режимі вібрації масажу для опрацювання відповідної ділянки тіла.

2.У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку «Увімкнути/Вимкнути» на панелі, щоб увімкнути пристрій на Рівні 1.

- Коротке натискання на кнопку дозволяє перемикати рівні від 0 до 5.
- Коли пристрій працює на Рівні 1–5, натисніть і утримуйте кнопку, щоб повернутися до Рівня 0, при якому пристрій припиняє роботу;

- на Рівні 0 натисніть і утримуйте кнопку, щоб повністю вимкнути пристрій.
- Пристрій автоматично перейде в Рівень 0 і зупинить роботу після 10 хвилин.
- Пристрій автоматично вимкнеться після 20 секунд перебування в режимі очікування без будь-яких дій.

Застосовуйте необхідний тиск при обраному режимі вібрації масажу для опрацювання відповідної ділянки тіла.




Виробник
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Зареєстрована адреса: Longtan Industrial Park, друга секція Східної третьої
кільцевої дороги, район Ченхуа, м. Ченду, провінція Сичуань, Китай.
Email:service@beoka.com

Вебсайт:www.beokaodm.com
Сертифікація систем управління якістю: ISO 9001, ISO 13485.


Дистриб'ютор
Shenzhen Beoka Technology Co., LTD

Встановлення та заміна масажної насадки


Перед заміною масажної насадки переконайтеся, що пристрій вимкнено, і вийміть насадку з монтажного роз'єму, акуратно приклавши зусилля для її від'єднання. Установіть нову насадку, вставивши штир насадки в роз'єм масажного пістолета, та переконайтеся, що вона надійно зафіксована.

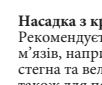

Насадка з круглим наконечником
Рекомендується для великих груп м'язів, наприклад чотириголового м'яза стегна та великого сідничного м'яза, а також для полегшення сильного м'язового та суглобового болю.

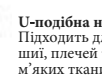

U-подібна насадка
Підходить для ділянок вздовж хребта, шиї, плечей та інших чутливих м'язів і м'язих тканин

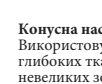

Конусна насадка
Використовується для суглобів, глибоких тканин, тригерних точок та невеликих зон м'язів (наприклад, щиколотки, зап'ястя).

Плоска насадка
Підходить для всіх частин тіла та універсального масажу.



Застереження щодо використання пристрою

- Не використовуйте пристрій, якщо він працює неправильно, пошкоджений внаслідок падіння або потрапляння у воду. Зверніться до сервісного центру для його перевірки та ремонту.
- Не використовуйте пристрій у ванні чи душі.
- Не занурюйте пристрій у воду та не залишайте його в умовах високої температури чи вологості, оскільки він містить літєвий акумулятор. Не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте пристрій поблизу джерел тепла або за надмірно високих температур.
- Не поміщайте виріб у мікрохвильову піч чи будь-яку ємність під тиском .
- Обирайте масажну насадку яка забезпечує найкращий ефект для потрібної ділянки.
- Не закривайте вентиляційні отвори пристрою будь-якими предметами.
- Не зберігайте виріб у нестійких або ненадійних місцях. Уникайте падіння та ударів пристрою й аксесуарів, це може призвести до травм або пошкодження/поломки продукту.
- Перед кожним використанням уважно перевіряйте основний блок, рівень заряду акумулятора, масажні насадки тощо, щоб переконатися в їхній справній роботі.
- Не змінюйте та не модифікуйте пристрій.
- Не залишайте пристрій на зарядці на всю ніч або без нагляду під час його заряджання чи роботи.
- Не вмикайте пристрій під час заряджання. Від'єднуйте джерело живлення відразу після його повного заряджання.

- Під час від'єднання зарядного кабелю тягніть за вилку, а не за кабель. Не від'єднуйте кабель мокрими руками — це може спричинити удар струмом, коротке замикання або пожежу.
- Не використовуйте зарядний кабель, якщо він пошкоджений або погано зафіксований у роз'ємі. Це може спричинити удар струмом, коротке замикання або пожежу.
- У зоні приєднання масажної насадки температура може підвищуватися через тривалу високочастотну вібрацію. Будьте уважні , оскільки існує ризик опіку під час заміни насадки.

Заряджання приладу

- Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій; орієнтовний час заряджання – приблизно 1,5 години.
- Для заряджання під'єднайте виріб до джерела живлення 5 В / 2 А за допомогою кабелю USB-A – USB-C, що входить до комплекту. Під час заряджання від розетки змінного струму потрібен адаптер для кабелю USB-A – USB-C; підійде звичайний адаптер від мобільного телефона. Час заряджання буде довшим, якщо параметри джерела живлення менші за 5 В / 2 А.
- Під час заряджання світлодіодний індикатор світиться зеленим кольором, що означає процес заряджання, і гасне після повного заряджання.
- Ви можете заряджати акумулятор за будь-якого рівня заряду.

- Під час роботи масажера індикатор заряду загоряється червоним, коли рівень заряду акумулятора нижчий за 30%, і починає блимати червоним, коли рівень заряду нижчий за 20%; у такому випадку пристрій слід якнайшвидше поставити на заряджання.
- Не рекомендується повністю розряджати акумулятор.
- Після повного зарядження пристрій у середньому може працювати до 2 годин; фактичний час роботи залежить від обраної частоти вібрації та сили тиску під час використання.

Обслуговування та догляд

- Протирайте пристрій вологою серветкою, потім протріть м'якою ганчіркою.
- Якщо пристрій надовго не використовується, зберігайте його в оригінальній коробці.
- Не викручуйте гвинти та не намагайтеся самостійно розбирати продукт.
- Щоб швидше досягти оптимальної ємності акумулятора, повністю зарядіть і повністю розрядіть новий акумулятор не менше трьох разів.
- Якщо пристрій тривалий час не використовується, заряджайте акумулятор щонайменше один раз на місяць.
- Уникайте використання спирту, розчинників, бензолу та інших агресивних засобів, оскільки вони можуть призвести до несправностей, пошкодження деталей або зміни кольору корпусу.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Вирішення
Масажний пістолет не вмикається.	Живлення вимкнене.	Натисніть і утримуйте кнопку Оп, щоб увімкнути пристрій.
	Низький рівень заряду.	Зарядіть масажний пістолет.
Масажний пістолет «заклинило».	Автоматичне вимкнення після 10 хвилин роботи.	Натисніть і утримуйте кнопку Оп, щоб продовжити роботу ще на 10 хвилин.
	В разі виникнення інших проблем звертайтеся: service@beoka.com	

Масажний пістолет автоматично вимикається.

Спрацював захист від перевантаження — пристрій вимикається при надмірному навантаженні.

Зачекайте близько 10 хвилин, потім знову увімкніть пристрій.

Масажний пістолет не вмикається.

Налаштоване авто-вимкнення через 10 хвилин.

Натисніть і утримуйте кнопку Оп, щоб повторно запустити пристрій ще на 10 хвилин.

Масажний пістолет «заклинило».

Масило загусло через низьку температуру.

Злегка послабте фіксатор насадки, потім увімкніть масажний пістолет.

Запобіжні заходи щодо утилізації виробу та акумулятора

Будь ласка підтримуйте переробку акумуляторів (літій-іонних).

УВАГА!

Акумулятор слід використовувати лише з даним виробом. Не заряджайте акумулятор, який було витягнуто з виробу. Тримайте акумулятор подалі від вогню, щоб уникнути перегрівання. Не проколюйте акумулятор цвяхами, не бийте його та не розбирайте й не модифікуйте. Не з'єднуйте позитивний і негативний полюси акумулятора безпосередньо металевими предметами. Не зберігайте акумулятор разом із ланцюжками, шпильками та іншими металевими предметами. Не заряджайте, не використовуйте й не залишайте акумулятор у місцях із високою температурою (біля плити, під прямим сонцем тощо). Це може спричинити нагрівання, займання або руйнування акумулятора.

Цей продукт містить літєвий акумулятор, не намагайтеся його розбирати. Зберігайте виріб у недоступному для немовлят і маленьких дітей місці. **У разі витікання електроліту дотримуйтесь таких рекомендацій:** а) Потрапляння рідини з акумулятора в очі може спричинити втрату зору. Не трійте очі руками, негайно промийте їх

УВАГА!

великою кількістю води та зверніться по медичну допомогу.
б) Потрапляння рідини на шкіру чи одяг може викликати подразнення або травму. Промийте уражену ділянку водою й зверніться до лікаря, якщо дискомфорт не минає.

- Акумулятор можна розбирати лише при остаточній утилізації продукту.
- Недотримання цієї інструкції може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або інших аварійних ситуацій.
- З усіх питань щодо ремонту (крім заміни акумулятора) звертайтеся до офіційного продавця.

Гарантія

- Продукт Beoka має однорічну безкоштовну гарантію за наявності чека/документа про покупку.
- Beoka не надає безкоштовну гарантію у разі таких пошкоджень із вини користувача:
 - а) несправності, спричинені несанкціонованим розбиранням або модифікацією продукту;
 - б) пошкодження або відмови внаслідок випадкового падіння під час використання чи транспортування;
 - в) відмови через відсутність належного обслуговування;
 - г) пошкодження, спричинені недотриманням інструкції з експлуатації;
 - д) несправності внаслідок некоректного ремонту сторонніми сервісами, не авторизованими Beoka.

- Ремонтні послуги поза межами гарантії надаються на платній основі відповідно до чинної політики.
- Для оформлення гарантійних звернень своєчасно звертайтеся до служби підтримки електронною поштою.
- За потреби схеми електричних з'єднань і інформацію про ремонтовані компоненти можуть отримати лише техніки, сертифіковані Beoka.
- Безпечний строк служби продукту становить 5 років.
- Дату виробництва зазначено на основному блоці або на упаковці.

Служба підтримки

Якщо у вас виникли запитання або зауваження, зверніться до нас — команда підтримки Beoka гарантує швидку відповідь і допомогу.

Email: service@beoka.com

*Якщо продукт має дефект або підлягає поверненню, зв'яжіться з нами із зазначенням номера замовлення протягом гарантійного періоду. Не викидайте жодних частин виробу, які можуть знадобитися для огляду чи ремонту.