

VITAMMY®

vivo

ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА

Модель ТВ9273

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням щітки, обов'язково ознайомтесь з інструкцією з використання.

ВСТУП

Дякуємо за вибір звукової зубної щітки Vitammy VIVO
(Модель ТВ9273)

Дана інструкція з експлуатації містить важливу інформацію щодо безпечного використання та поради з належного застосування та догляду за придбаним виробом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час користування електроприладами, завжди дотримуйтеся основних правил безпеки, зокрема таких: Прочитайте всі інструкції, надані виробником.

- Не занурюйте зубну щітку в гарячу воду
- Даний пристрій може використовуватися дітьми з 8 років а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Діти не повинні гратися з цим пристроєм.
- Чищення та обслуговування пристрою не повинно проводитись дітьми без нагляду дорослих.
- Не тисніть зубною щіткою на зуби та/або ясна з надмірною силою.
- Не чистіть одну ділянку протягом тривалого часу, щоб не пошкодити поверхню зубів і/або ясен.
- Перед кожним використанням перевіряйте зубну щітку на наявність пошкоджень.
- Якщо ви перенесли операцію або стоматологічну процедуру, перед використанням зубної щітки необхідна консультація стоматолога. Під час перших використань зубної щітки, ваші ясна можуть кровоточити. Якщо це не зникає після тижня використання зубної щітки, зверніться до лікаря.
- Якщо вам встановлено кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням пристрою зверніться до свого лікаря або виробника імплантованого пристрою.
- Це пристрій особистої гігієни, який не призначений для використання кількома особами.
- Рекомендовано замінювати головку щітки кожні 3 місяці
- Акумулятор зубної щітки містить шкідливі речовини, тому зубну щітку слід утилізувати безпечним для навколишнього середовища способом. Не викидайте зубну щітку разом з побутовими відходами.

ОПИС ПРИСТРОЮ

Захисний ковпачок
головки щітки

Головка щітки

Штифт щітки

Кнопка Увімкн/
Вимкн.

Ручка

Індикатор

Кейс для зберігання

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Увага!Перед підключенням до джерела живлення зубну щітку потрібно вимкнути.

- Відкрийте роз'єм USB-C, розташований біля основи ручки зубної щітки
- Під'єднайте один кінець кабелю USB-C до роз'єму для зубної щітки, а інший – до адаптера/зарядного пристрою
- Підключіть адаптер/зарядний пристрій до розетки
- Під час заряджання світлодіодний індикатор на зубній щітці блиматиме.Коли акумулятор буде повністю заряджено, світлодіодний індикатор світитиметься постійно.

ВСТАНОВЛЕННЯ ГОЛОВКИ ЩІТКИ

- Встановіть головку зубної щітки на штифт, таким чином, щоб щетинки головки зубної щітки були розташовані збоку від кнопки ON/OFF.
- Переконайтесь що головка щітки належним чином встановлена на штифті
- Зніміть захисну кришку з головки щітки
- Ви можете відрегулювати жорсткість щетинок щітки відповідно до своїх потреб, зануривши головку щітки у воду різної температури:
- Холодна вода - більш жорсткі щетинки,
- Вода кімнатної температури - звичайні щетинки, тепла вода - м'які щетинки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Нанесіть зубну пасту на вимкнену зубну щітку.
- Помістіть зубну щітку в рот і притисніть її щетиною до поверхні зубів.
- Увімкніть зубну щітку за допомогою кнопки I/O і почніть чистити зуби.
- Увімкніть зубну щітку, натиснувши кнопку ON/OFF, і почніть чистити в звичайному режимі. Зубна щітка буде працювати протягом 4 циклів по 30 секунд кожен , з короткою перервою між ними. Після останнього циклу, зубна щітка автоматично вимкнеться.

- Після завершення циклу зубна щітка автоматично вимкнеться.
- Після закінчення промийте головку щітки під проточною водою. Струсіть надлишок води з головки щітки та висушіть ручку рушником.

⚠ **УВАГА!** Не натискайте на кнопки нігтями, оскільки це може пошкодити покриття корпусу щітки.

Примітка: Зубна щітка призначена виключно для домашнього використання.

ВИБІР ПРОГРАМ ЧИЩЕННЯ

Зубна щітка Vitammy VIVO має 3 унікальні режими очищення

Clean (Очищення): щоденне очищення та видалення нальоту (стандартний режим)

White(Відбілювання): режим відбілювання

Sensitive (Чутливий режим): надзвичайно ніжний режим, рекомендований для ніжних ясен і чутливих зубів.

Під час чищення зубів ви завжди можете змінити режим очищення, натиснувши кнопку ON/OFF протягом 5 секунд. Обирайте бажаний режим в такій послідовності : Clean-White-Sensitive. Зубна щітка запам'ятовує вибраний режим і почне з нього наступне чищення.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед очищенням щітки переконайтесь, що кришка порту USB-C у нижній частині тримача зубної щітки надійно закрита


- Очистіть корпус щітки вологою тканиною

ПРИМІТКА:

- Ніколи не занурюйте всю зубну щітку у воду.
- Ніколи не використовуйте для очищення щітки миючі засоби.

⚠ **УВАГА:** не використовуйте для очищення щітки корозійні хімікати, грубі абразивні матеріали або металеві губки.

- Ми рекомендуємо замінювати насадку щітки кожні 3 місяці.

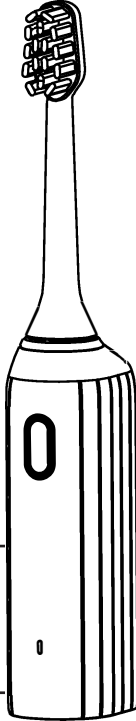

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Зубна щітка слабо вібрує.	Не притискайте зубну щітку до поверхні зубів надто сильно.
Зубна щітка працює короткий період часу.	Зубна щітка розряджена - зарядіть зубну щітку
Зубна щітка не працює	Батарея розряджена - зарядіть зубну щітку Ви використовуєте зубну щітку вперше або після перерви більше ніж на 3 місяці, батарею потрібно заряджати не менше 4 годин
Світлодіод не світиться, поки зубна щітка заряджається.	Перевірте, чи правильно під'єднано зарядний пристрій Світлодіод може засвітитися лише через 10 хвилин після початку заряджання, якщо це перше заряджання або заряджання після 3 місяців невикористання зубної щітки.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб отримати додаткову інформацію про пункти збору використаного обладнання, зверніться до місцевих органів влади або місцевого пункту утилізації побутових відходів.

СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ

Попереджувальні знаки та символи, які є в посібнику та на самому пристрої, важливі для безпечного використання придбаного обладнання.
Їх значення пояснюється в таблиці нижче:

	Прочитайте інструкцію з експлуатації		Виробник
	Постійний струм		Імпортёр
	Дата виготовлення		Подвійна ізоляція
	Серійний номер		Пристрій відповідає вимогам, зазначеним у відповідних директивах CE
	Відповідно до директиви WEEE 2012/19/EU: відпрацьоване обладнання має бути утилізовано відповідно до чинних норм.		

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Зубна щітка Vitammy VIVO (Модель TB9273)
2. 1 x насадка щітки
3. Кейс для зберігання
4. Інструкція з використання

ГАРАНТІЯ

Пристрій	Vitammy VIVO TB9273	
Продавець	Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41 +38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram) service@extremepride.com.ua diagnostic@extremepride.com.ua	
Гарантія	Продавець запевняє Покупця, що прилад VITAMMY, на який поширюється ця гарантія, був розроблений і виготовлений відповідно до високих стандартів якості. Також запевняє покупця в тому, що пристрій належної якості, без дефектів матеріалів, які можуть перешкоджати його належній роботі. У разі виявлення дефектів, пошкоджень і несправностей протягом гарантійного терміну, Продавець безкоштовно відремонтує або замінить пристрій на новий у найкоротший термін, але не більше ніж за 14 днів.	
Гарантійний термін	Ця гарантія передбачає, що обладнання буде доставлено до сервісного центру за рахунок Покупця, безкоштовно відремонтовано та безкоштовно повернуто Покупцю.	
	Гарантійний термін пристрою становить 24 місяці	
Порядок дій у разі виявлення несправності	Гарантія не поширюється на частини та аксесуари, які зношуються під час нормального використання: насадка для щітки, акумулятор. Гарантія дійсна з дати покупки, підтвердженої доказом покупки, який повинен бути доданий до гарантійного талона. Ця гарантія діє на території України Щоб скористатися гарантією, протягом 14 днів з моменту виявлення дефекту зверніться на гарячу лінію для довідки та технічної підтримки для отримання допомоги та, якщо необхідно, ініціювання процедури рекламачії. У рамках процедури розгляду рекламачії, обладнання, на яке подано скаргу, слід надіслати на адресу сервісу, додавши цей гарантійний талон і доказ покупки. Для збереження чинності гарантії разом із пристроєм необхідно надати цей гарантійний талон (правильно заповнений і підписаний) і чек, що містить дату покупки та назву придбаного пристрою.	
На що не поширюється гарантія	Гарантія не передбачає будь-якої компенсації за пряму чи непряму шкоду, заподіяну особам або пристроям, коли пристрій не працював або перебував в обслуговуванні.	
	Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням, на пошкодження, які виникли в зв'язку з неправильним зберіганням та обслуговуванням приладу, на несанкціоноване втручання в обслуговування, несанкціонований ремонт, модифікацію та зміну конструкції або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.	
	Гарантія не поширюється на поломку виробу внаслідок зміни властивостей (зниження якості) елементів, що піддаються природному зносу.	
	Гарантійний ремонт не поширюється на дії, пов'язані з обслуговуванням і очищенням пристрою, описані в Посібнику користувача.	
Печатка та підпис продавця	Дата	Підпис

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.
Щоб отримати додаткову інформацію про пункти збору використаного обладнання, зверніться до місцевих органів влади або місцевого пункту утилізації побутових відходів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41
+38 (067) 654-32-86
(Viber, Telegram)
service@extremepride.com.ua
diagnostic@extremepride.com.ua

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.
Південна дорога Чженхе, місто Леліу, район Шунде, місто Фошань, провінція Гуандун, Китай
Зроблено в Китаї / Made in China